



Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad

Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16

ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)

Cliente: SH+

Ejecución: 20

Resumen:

Información del reporte

Generado por: EMSI FARMA

Fecha: 16/02/2022 14:02:30

Tiempo de muestreo: 0:0:31 (hh:mm:ss tt)

Cantidad de muestras: 67

Información del ciclo

Tipo: Prueba de estanco

Producto: Puesta en marcha

Receta: Prueba de estanqueidad

Inicio de ciclo: 16/02/2022 13:22:45

Operador: EMSIFARMA

Fin de ciclo: 16/02/2022 13:58:19

Operador: EMSIFARMA



Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad

Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16

ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)

Cliente: SH+

Ejecución: 20

Parámetros iniciales del ciclo:

Presurización

Referencia de presión 2 bar

Tiempo máximo de presurización de la cámara 1800 s

Estabilización


Tiempo de estabilización 10 min

Máxima desviación de presión 0.1 bar

Evaluación

Máxima desviación de presión 0.013 bar


Tiempo de evaluación 10 min

	Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad	
	Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16	
	ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)	
	Cliente: SH+	Ejecución: 20

Parámetros finales del ciclo:

Resultados del ciclo

Pérdida de presión de la fase de evaluación	0.001 bar
Presión inicial de la fase de estabilización	2 bar
Presión inicial de la fase de evaluación	1.953 bar
Resultado de prueba de estanco conforme	SÍ
Presión final de la fase de evaluación	1.952 bar
Presión final de la fase de estabilización	1.953 bar
Ciclo finalizado con fallo	NO
Horas de duración de la prueba de estanco	0 hr
Minutos de duración de la prueba de estanco	10 min
Segundos de duración de la prueba de estanco	0 s


	Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad	
	Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16	
	ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)	
	Cliente: SH+	Ejecución: 20


Leyenda de variables:

Identificador	Descripción	Enlace OPC UA	UM	Estado
PICR12	Presión en la cámara	ns=3;s=AI_linear_conditioning_DB_A1_PIC R12_Value	bar	En servicio

Presión en cámara

— Presión en la cámara

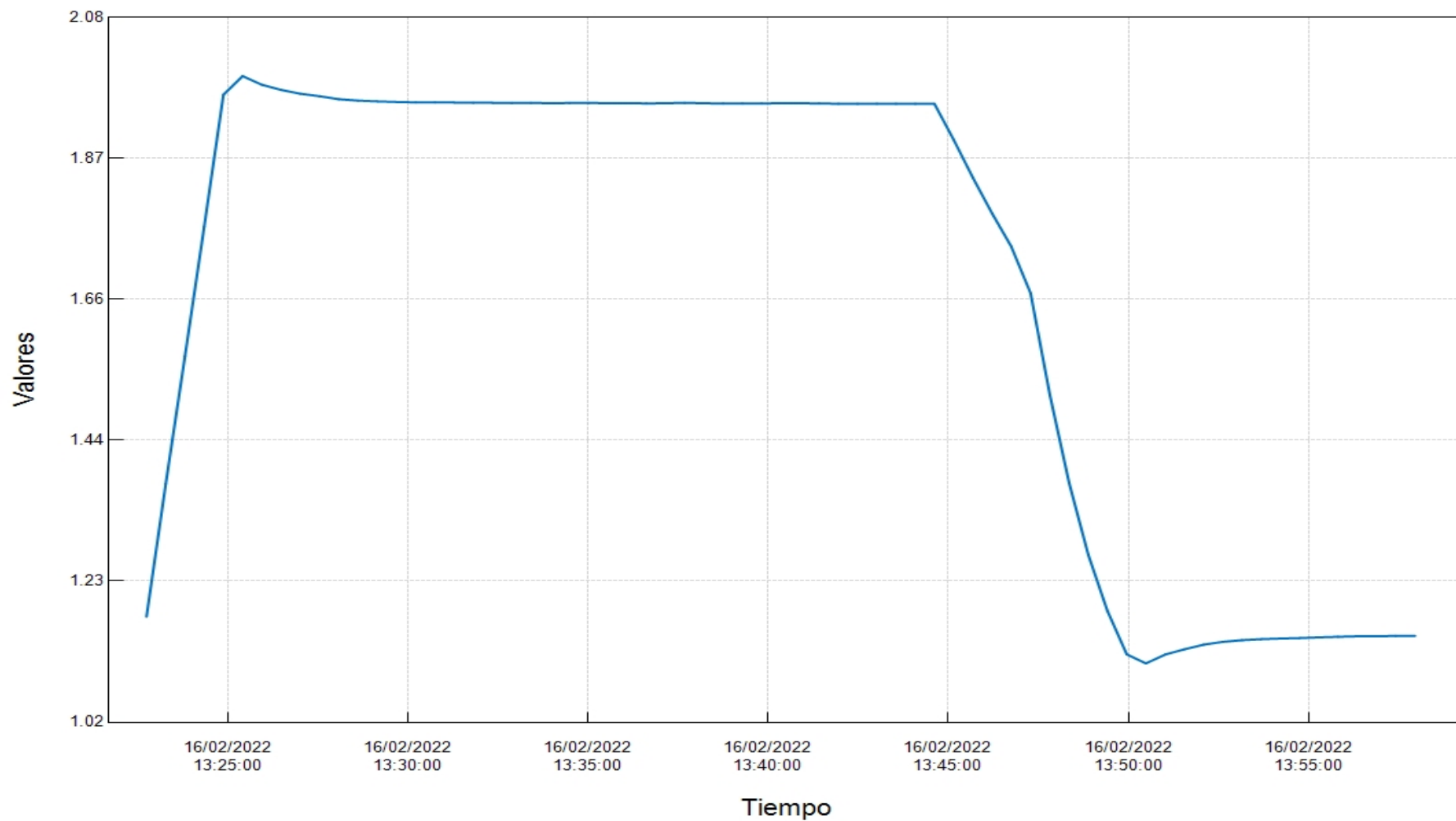

	Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad	
	Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16	
	ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)	
	Cliente: SH+	Ejecución: 20

Fases ejecutadas:

- 1- 16/02/2022 13:22:47 (1): Presurización
- 2- 16/02/2022 13:25:13 (2): Estabilización
- 3- 16/02/2022 13:35:12 (3): Evaluación
- 4- 16/02/2022 13:45:12 (4): Fin de ciclo



Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad

Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16

ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)

Cliente: SH+

Ejecución: 20

Tabla de datos:

Fecha/Hora

PICR12 (bar)

16/02/2022 13:22:45

1.178

16/02/2022 13:22:47 : Presurización

16/02/2022 13:23:17

1.378

16/02/2022 13:23:49

1.571

16/02/2022 13:24:21

1.767

16/02/2022 13:24:53

1.966

16/02/2022 13:25:13 : Estabilización

16/02/2022 13:25:25

1.994

16/02/2022 13:25:57

1.981

16/02/2022 13:26:29

1.974

16/02/2022 13:27:01

1.968

16/02/2022 13:27:33

1.964

16/02/2022 13:28:05

1.960

16/02/2022 13:28:37

1.957

16/02/2022 13:29:09

1.956

16/02/2022 13:29:41

1.955

16/02/2022 13:30:13

1.955

16/02/2022 13:30:45

1.955

16/02/2022 13:31:17

1.954

16/02/2022 13:31:49

1.954

16/02/2022 13:32:21

1.954

16/02/2022 13:32:53

1.954

16/02/2022 13:33:25

1.954

16/02/2022 13:33:57

1.953

16/02/2022 13:34:29

1.954

16/02/2022 13:35:01

1.954

16/02/2022 13:35:12 : Evaluación

16/02/2022 13:35:33

1.953

16/02/2022 13:36:05

1.954

16/02/2022 13:36:37

1.953

16/02/2022 13:37:09

1.953

16/02/2022 13:37:41

1.954

16/02/2022 13:38:13

1.953

16/02/2022 13:38:45

1.953



Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad

Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16

ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)

Cliente: SH+

Ejecución: 20

Fecha/Hora

PICR12 (bar)

16/02/2022 13:39:17	1.953
16/02/2022 13:39:49	1.953
16/02/2022 13:40:21	1.953
16/02/2022 13:40:53	1.953
16/02/2022 13:41:25	1.953
16/02/2022 13:41:57	1.953
16/02/2022 13:42:29	1.952
16/02/2022 13:43:01	1.953
16/02/2022 13:43:33	1.953
16/02/2022 13:44:05	1.953
16/02/2022 13:44:37	1.952
16/02/2022 13:45:09	1.898

16/02/2022 13:45:12 : Fin de ciclo

16/02/2022 13:45:41	1.841
16/02/2022 13:46:13	1.787
16/02/2022 13:46:45	1.737
16/02/2022 13:47:17	1.666
16/02/2022 13:47:49	1.513
16/02/2022 13:48:21	1.381
16/02/2022 13:48:53	1.272
16/02/2022 13:49:25	1.186
16/02/2022 13:49:57	1.121
16/02/2022 13:50:29	1.107
16/02/2022 13:51:01	1.121
16/02/2022 13:51:33	1.129
16/02/2022 13:52:05	1.136
16/02/2022 13:52:37	1.140
16/02/2022 13:53:09	1.143
16/02/2022 13:53:41	1.144
16/02/2022 13:54:13	1.145
16/02/2022 13:54:45	1.146
16/02/2022 13:55:17	1.147
16/02/2022 13:55:49	1.148
16/02/2022 13:56:21	1.148
16/02/2022 13:56:53	1.148
16/02/2022 13:57:25	1.149
16/02/2022 13:57:57	1.149



Lote: Puesta en marcha_Estanqueidad

Código: Prueba de estanco_2022.02.16.13.22.45_20_16

ID Equipo: Autoclave 1 (G41554801)

Cliente: SH+

Ejecución: 20

Realizado por:

Nombre	Responsabilidad	Fecha	Firma

Revisado por:

Nombre	Responsabilidad	Fecha	Firma

Aprobado por:

Nombre	Responsabilidad	Fecha	Firma